

**شرکت تجهیزات پزشکی آرمین درمان**

**نماینده انحصاری محصولات کمپانی beurer آلمان در ایران**



**دستگاه ترازوی دیجیتال**

**مدل GS 10**

تهران. خیابان کریمخان، خیابان میرزای شیرازی، کوچه ۱۳، پلاک ۳۴، طبقه دوم




\* این دستگاه شامل دو سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد.\*

از اینکه یکی از محصولات ما را برگزیدید، سپاسگزاریم. نام ما نشانه کیفیت بالای محصولاتمان در زمینه گرمایی، ترازو، فشارخون، درجه حرارت بدن، نبض، آرامش، ماساژ و مرطوب کننده هوا است که بارها به طور کامل مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته‌اند. لطفاً این راهنما را به دقت مطالعه کرده و از دستورات آن پیروی نمایید. راهنما را برای استفاده خود و دیگر کاربران در دسترس قرار دهید.

## گروه Beurer

این دفترچه راهنمای استفاده از محصول را با دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده آتی نگهداری کنید. توجه کنید که دفترچه راهنما در دسترس دیگر کاربران نیز باشد و موارد قید شده در آن را رعایت نمایند.

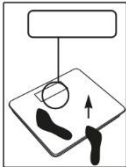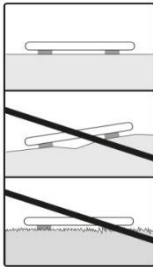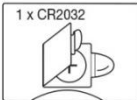

 <p>Quickstart</p>	<p>باتری را داخل ترازو قرار دهید یا نوار عایق را بیرون بکشید.</p>  <p>1 x CR2032</p>
	<p>ترازو را بر روی سطح صاف و ایمن قرار دهید.</p> 
	<p>می‌توانید ترازو را برای واحدهای مختلف وزن (کیلوگرم/ پوند/ استون) تنظیم کنید. دکمه تنظیم در پشت</p>  <p>KG → LB: ST d = 0,1 kg / 0,2 lb / 1 lb</p>
	<p>پیام خطا: علامت <b>LO</b> به این معنی است که باتری نیاز به تعویض دارد.</p>  <p>→</p>  <p>1 x CR2032</p>

## نمادها و علائم

این علامتها در این دفترچه راهنما استفاده شده‌اند:	
هشدار	این علامت هشدار نشاندهنده احتمال خطر و صدمه جانی می‌باشد.
احتیاط	این علامت هشدار نشاندهنده احتمال خطر و صدمه جانی می‌باشد.
	لزوم توجه به نکات ذکر شده مهم.
	به دفترچه راهنما مراجعه شود.
	بسته‌بندی محصول با روش دوست محیط زیست دور انداخته شود.
	علامت شناسایی مواد استفاده شده در بسته بندی. $A$ = کد مواد، $B$ = شماره مواد، $1-7$ = پلاستیکها، $20-22$ = کاغذ و مقوا
	جداسازی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
	باتریهای حاوی مواد خطرناک را درزباله خانگی دور نریزید.
	سازنده
	برچسب CE این محصول با دستورالعملهای اروپایی و ملی مطابق می‌باشد.
	ارزیابی مطابقت محصول در انگلستان
	این محصولات با مقررات فنی EAEU مطابقت دارند.

## توصیه های کلی:

- ظرفیت ترازو حداکثر ۱۸۰ کیلوگرم و دقت ترازو ۱۰۰ گرم است.
- **تمیز کردن:** برای تمیز کردن ترازو از یک دستمال نمدار و در صورت لزوم کمی مایع شوینده استفاده کنید. هرگز ترازو را در آب فرو نبرید و در زیر آب روان نشوید.
- ترازو را در مقابل ضربه، رطوبت، گرد و خاک، مواد شیمیایی، تغییرات شدید دما و میدانهای مغناطیسی محافظت کرده و در مجاورت منابع گرمایی قرار ندهید.
- هرگز با یک پا روی لبه ترازو نروید زیرا اینکار سبب واژگونی ترازو می شود.

## هشدار

- لوازم بسته بندی را در دسترس کودکان قرار ندهید.
- این ترازو مناسب استفاده تجاری نمی باشد.
- در صورت داشتن هر گونه سؤال در رابطه با عملکرد و استفاده از محصول با فروشنده یا خدمات مشتری تماس بگیرید.
- تعمیرات فقط باید توسط مرکز خدمات مشتری یا فرد متخصص انجام شود.

## نکاتی در رابطه با باتری

- اگر پوست یا چشمان شما با مایع داخل باتری تماس پیدا کند بلافاصله محل آلوده را با آب تمیز بشویید و به پزشک مراجعه نمایید.

## ⚠ خطر خفگی

- احتمال دارد باتریهای کوچک را بچه ها قورت داده و راه تنفسی آنها مسدود شود بنابراین هرگز باتریها را در دسترس کودکان و خردسالان قرار ندهید.
- به علامت مثبت (+) و منفی (-) باتری توجه کنید.
- اگر باتری در دستگاه نشت کرده بود، دستکش محافظ به دست کرده و محفظه باتری را با دستمال خشک، تمیز کنید.
- باتری را در مقابل دمای زیاد محافظت کنید.
- ⚠ خطر انفجار! هرگز باتری را در آتش نیندازید.
- باتری را شارژ نکنید و یا در مدار کوتاه قرار ندهید.
- اگر برای مدت طولانی قصد استفاده از محصول را ندارید، باتری را از محفظه آن خارج کنید.
- فقط از باتریهای یکسان در دستگاه استفاده نمایید.
- همیشه باتریها را با هم، تعویض نمایید.
- از باتریهای شارژی استفاده نکنید.
- باتریها را باز نکرده، نشکنید و له نکنید.
- باتریهای خالی باید در محلهای مخصوص زباله بازیافتی دور ریخته شوند.
- علامتهای زیر در روی باتری نشاندهنده وجود مواد مضر است:

Pb = سرب

Cd = کادمیوم



Hg = جیوه

- به دلایل زیست محیطی، محصول را در پایان عمر مفید آن در زباله های خانگی نیندازید. دستگاه را به محل جمع آوری یا بازیافت محلی مناسب بسپارید. دستگاه را مطابق با دستورالعمل EC - WEEE (ضایعات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی) دور بیندازید. اگر سؤالی دارید، لطفاً با مقامات محلی مسئول دفع زباله تماس بگیرید.

## گارانتی

این محصول دارای ۲ سال گارانتی می باشد.

شرکت تجهیزات پزشکی آرمین درمان  
نماینده انحصاری Beurer آلمان



تهران، خیابان کریمخان، خیابان میرزای شیرازی، کوچه ۱۳، شماره ۳۴

کدپستی: ۱۵۸۵۷۷۳۱۴۵      تلفن: ۶ - ۸۸۳۲۶۶۴۴

خدمات پس از فروش: ۸۸۸۶۴۸۱۰ - ۸۸۸۶۴۸۷۲