

beurer

ماساژور مدل MG 70 با لامپ مادون قرمز



شرکت تجهیزات پزشکی آرمین درمان

نماینده انحصاری Beurer آلمان

تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان میرزای شیرازی، کوچه ۱۵، پلاک ۱۴ - طبقه دوم

تلفن : ۶ - ۸۸۳۲۶۶۴۴

info@armindarman.com

www.armindarman.com

* این ماساژور شامل دو سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می‌باشد.*

مشتری گرامی

از اینکه یکی از محصولات ما را برگزیدید، سپاسگزاریم. نام و محصولات ما، مظهر کیفیت برتر شناخته شده است، زیرا محصولات ما در زمینه‌های گرمایی، فشار خون، درجه حرارت بدن، توزین، آرامش، ماساژ و مرطوب کننده هوا به طور کامل مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته‌اند.

برای رضایت درازمدت از ماساژور خود لطفاً دفترچه راهنما را به دقت و به تفصیل مطالعه فرمایید. دفترچه راهنما را برای مراجعه آتی در دسترس خود و دیگر کاربران قرار دهید.

گروه Beurer

نکات مهم

- ماساژور را فقط با ولتاژ ذکر شده بر روی مدل استفاده کنید.
- این ماساژور مانند دیگر وسایل برقی، برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی با احتیاط و دقت بکار گرفته شود: !
- بلافاصله پس از استفاده دوشاخه را از پریز خارج نمایید.
- از هر گونه تماس ماساژور با آب جلوگیری نمایید (جهت تمیز کردن از دستمال مرطوب به طوریکه دستمال کمی نمدار است استفاده کنید). هرگز ماساژور را در آب فرو نبرید. هرگز از ماساژور در حمام، زیر دوش، در استخر شنا و در وان پر آب استفاده نکنید. اگر به طور اتفاقی آب وارد ماساژور شد، بلافاصله دوشاخه ماساژور را از پریز برق درآورده و با قسمت خدمات پس از فروش و یا فروشنده لوازم الکتریکی خود تماس بگیرید.
- ماساژور و خصوصاً سیم برق آن را هر بار قبل از استفاده از نظر وجود آسیب دیدگی کنترل نمایید.
- در صورت آسیب دیدگی سیم برق، هرگز آنرا به منبع برق متصل نکنید. و با فروشنده لوازم الکتریکی و یا قسمت خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
- تعمیر ماساژور باید فقط توسط خدمات پس از فروش و یا عامل مجاز صورت گیرد.
- هرگز ماساژور را با گرفتن سیم برق آن بلند و حمل نکنید.

○ در صورت بروز هر گونه مشکلی در هنگام استفاده، بلافاصله

ماساژور را خاموش کرده و دو شاخه را از پریز بیرون آورید.

این ماساژور تنها برای اهداف توضیح داده شده در راهنما کاربرد دارد..

مسئولیت هرگونه صدمه ناشی از بی‌دقتی و استفاده نادرست از ماساژور به عهده تولیدکننده نمی‌باشد.

تنها لوازم جانبی همراه با این ماساژور را بکار ببرید و از استفاده لوازم ماساژورهای دیگر بر روی این ماساژور خودداری کنید.

این ماساژور برای استفاده شخصی مناسب است و کاربرد پزشکی و تجاری ندارد.

برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد، ماساژور را به طور مداوم بیش از ۲۰ دقیقه استفاده نکنید. قبل از استفاده مجدد صبر کنید تا ماساژور خنک شود.

سطح ماساژور در حین استفاده گرم می‌شود. اشخاص حساس به گرما به این نکته توجه داشته باشند.

توجه داشته باشید هیچ گاه شیئی داخل دستگاه هنگام باز بودن فرو نبرید و قسمت متحرک دستگاه امکان حرکت آزادانه داشته باشد و هیچ شیئی مانع حرکت دستگاه نباشد و هنگام استفاده از دستگاه دقت کنید امکان فرو رفتن مو داخل آن نباشد در صورت لزوم از وسایل پوشاننده موی سر استفاده نمایید.

در صورتی که می‌خواهید دسته آنرا یا وسایل جانبی را جدا یا متصل نمائید دستگاه را خاموش کنید و در صورت روشن بودن دسته آنرا یا وسایل جانبی را جدا یا متصل ننمائید.

هرگز روی ماساژور را در حالت روشن نپوشانید (با پتو، بالش و ...).

کودکان، و اشخاص ناتوان و معلول نباید بدون نظارت بزرگسالان از ماساژور استفاده کنند مگر این که از قبل با طرز کار آن آشنا شده باشند.

ماساژور را برای حیوانات استفاده نکنید.


اشخاصی که از باتری قلب استفاده می‌کنند نباید بدون مشورت با پزشک از ماساژور استفاده نمایند و هرگز نباید ناحیه قلب را ماساژ دهند.

هرگز ماساژور را در نقاط ملتهب، سوخته و صدمه دیده پوست بکار نبرید.

از ماساژور در قسمت‌هایی چون استخوان‌ها (مثلا مفاصل و ستون مهره‌ها)، سر و دیگر نقاط حساس بدن استفاده نکنید.

- در هر یک از موارد زیر بدون نظر پزشک از ماساژ استفاده نکنید:
سرماخوردگی همراه با تب بالا، واریس، لخته‌شدگی خون در قلب یا رگ،
التهاب رگ، یرقان، دیابت، بارداری، اختلالات عصبی (مانند سیاتیک) یا
عفونت حاد.
- از ماساژور در رختخواب استفاده نکنید. هرگز نباید در حین استفاده از
ماساژور به خواب روید.

بخشهای مختلف دستگاه:

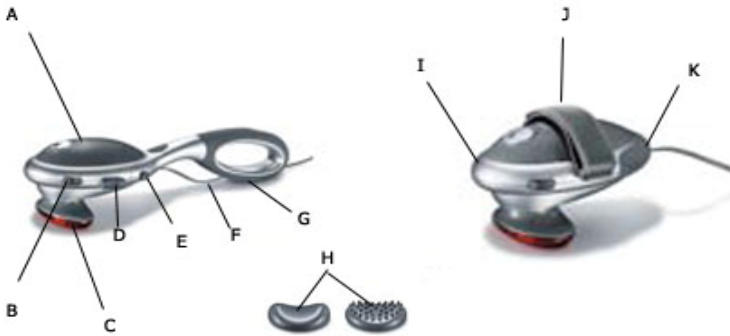

A: کنترل سرعت ماساژ

B: انتخاب عملکرد

OFF خاموش

M ماساژ

M + H ماساژ و مادون قرمز

C: قسمت ماساژ دهنده و سطح لامپ مادون قرمز

D: حلقه بستن به دست

E: دکمه قفل دسته

F: سیم برق

G: روکش جدا شونده

H: وسایل جانبی

- ماساژ قسمت های نرم

- ماساژور دندانهای ای

I: ماساژور

J: دسته - نگهدارنده

K: روکش دوشاخه

طریقه استفاده

هدف: دستگاه منحصرًا برای ماساژ بدن انسان تولید شده است. در صورت استفاده تصمیم بگیرید از دستگاه با دسته استفاده می کنید یا بدون آن، همراه کمر بند کف دست.

برای جدا کردن دسته، دو دکمه نگهدارنده دو طرف دستگاه را فشار دهید و دسته را از آن جدا کنید.

دستتان را داخل حلقه (روی تصویر J) قرار دهید جهت تنظیم اندازه آن با دست از چسب روی حلقه استفاده کنید.

قبل از زدن دوشاخه به برق از خاموش بودن ماساژور مطمئن شوید.

شما میتوانید از دستگاه، همراه با سرهای اضافی (روکش های جانبی) یا بدون آنها استفاده کنید. به سادگی سری مورد نظر را که ترجیح می دهید، انتخاب کنید.

برای استفاده از ماساژ همراه با گرمای مادون قرمز ماساژور را روی M + H قرار دهید. برای استفاده از ماساژ (بدون مادون قرمز) کفیسست کلید را روی M قرار دهید.

با استفاده از کلید کنترل، سرعت چرخش ماساژور را تنظیم نمایید.

ماساژور را بر روی نقطه ای از بدن که می خواهید ماساژ دهید قرار دهید. می توانید هنگام ماساژ بدن بنشینید، بایستید یا دراز بکشید. قدرت ماساژ با فشار بر ماساژور کم یا زیاد می شود. یک نقطه از بدن را به مدت بیش از ۳ دقیقه ماساژ ندهید و ماساژور را روی نقاط مختلف به حرکت در آورید.

پس از ۲۰ دقیقه استفاده، ماساژور را خاموش کرده و دوشاخه آنرا از پریز خارج نمایید و ماساژور را در محل خشک نگهداری کنید.

تمیز کردن

برای تمیز کردن ماساژور مطمئن شوید که دوشاخه آن به برق متصل نباشد سپس آنرا با دستمال نمدار تمیز نمایید. می توانید برای تمیز کردن ماساژور از مایع پاک کننده ملایم استفاده نمایید. توجه کنید که آب وارد ماساژور نشود و تا خشک شدن کامل ماساژور از آن استفاده ننمایید.