

شرکت تجهیزات پزشکی آرمین درمان

نماینده انحصاری محصولات کمپانی beurer آلمان در ایران



دستگاه ترازوی دیجیتال

مدل GS 202

تهران. خیابان کریمخان، خیابان میرزای شیرازی، کوچه ۱۳، پلاک ۳۴، طبقه دوم

* این دستگاه شامل دو سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد.*

مشتری گرامی


از اینکه یکی از محصولات ما را برگزیدید، سپاسگزاریم. نام ما نشانه کیفیت بالای محصولاتمان در زمینه گرمایی، ترازو، فشارخون، درجه حرارت بدن، نبض، آرامش، ماساژ و مرطوب کننده هوا است که بارها به طور کامل مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته‌اند. لطفاً این راهنما را به دقت مطالعه کرده و از دستورات آن پیروی نمایید. راهنما را برای استفاده خود و دیگر کاربران در دسترس قرار دهید.

گروه Beurer

این دفترچه راهنمای استفاده از محصول را با دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده آتی نگهداری کنید. توجه کنید که دفترچه راهنما در دسترس دیگر کاربران نیز باشد و موارد قید شده در آن را رعایت نمایند.



| | |
|---|---|
|  <p>Quickstart</p> | <p>باتری را داخل ترازو قرار دهید یا نوار عایق را بکشید.</p>  |
|  | <p>ترازو را بر روی سطح صاف و ایمن قرار دهید.</p>  |
|  | <p>می‌توانید ترازو را برای واحدهای مختلف وزن (کیلوگرم / پوند / استون) تنظیم کنید. دکمه تنظیم در پشت ترازو قرار دارد.</p>  <p>KG → LB → ST d = 0,1 kg / 0,2 lb / 1 lb</p> |

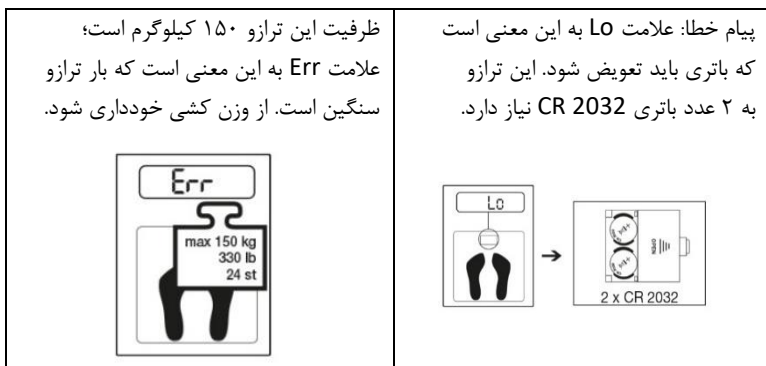

توصیه های کلی:

- ظرفیت ترازو حداکثر ۱۵۰ کیلوگرم و دقت ترازو ۱۰۰ گرم است.
- **تمیز کردن:** برای تمیز کردن ترازو از یک دستمال نمدار و در صورت لزوم کمی مایع شوینده استفاده کنید. هرگز ترازو را در آب فرو نبرید و در زیر آب روان نشویید.
- ترازو را در مقابل ضربه، رطوبت، گرد و خاک، مواد شیمیایی، تغییرات شدید دما و میدانهای مغناطیسی محافظت کرده و در مجاورت منابع گرمایی قرار ندهید.
- هرگز با یک پا روی لبه ترازو نروید زیرا اینکار سبب واژگونی ترازو می شود.
- لوازم بسته بندی را در دسترس کودکان قرار ندهید.
- این ترازو مناسب استفاده تجاری نمی باشد.
- در صورت داشتن هر گونه سؤال در رابطه با عملکرد و استفاده از محصول با فروشنده یا خدمات مشتری تماس بگیرید.

- قبل از اعلام خرابی، لطفاً ابتدا باتریها را کنترل کرده و در صورت نیاز تعویض نمایید.
- تعمیرات فقط باید توسط مرکز خدمات مشتری یا فرد متخصص انجام شود.
- اگر پوست یا چشمان شما با مایع داخل باتری تماس پیدا کند بلافاصله محل آلوده را با آب تمیز بشویید و به پزشک مراجعه نمایید.
- **⚠ خطر خفگی:** احتمال دارد باتریهای کوچک را بچه ها قورت داده و راه تنفسی آنها مسدود شود بنابراین هرگز باتریها را در دسترس کودکان و خردسالان قرار ندهید.
- به علامت مثبت (+) و منفی (-) باتری توجه کنید.
- اگر باتری در دستگاه نشت کرده بود، دستکش محافظ به دست کرده و محفظه باتری را با دستمال خشک، تمیز کنید.
- باتری را در مقابل دمای زیاد محافظت کنید.
- **⚠ خطر انفجار!** هرگز باتری را در آتش نیندازید.
- باتری را شارژ نکنید و یا در مدار کوتاه قرار ندهید.
- اگر برای مدت طولانی قصد استفاده از محصول را ندارید، باتریها را از محفظه آن خارج کنید.
- فقط از باتریهای یکسان در دستگاه استفاده نمایید.
- همیشه باتریها را با هم، تعویض نمایید.
- از باتریهای شارژی استفاده نکنید.

- باتریها را باز نکرده، نشکنید و له نکنید.
- باتریهای خالی باید در محل‌های مخصوص زباله بازیافتی یا در مکان‌های مخصوص یا محل جمع آوری و بازیافت دور ریخته شوند.
- علامتهای زیر در روی باتری نشاندهنده وجود مواد مضر است:



Pb = باتری حاوی سرب است.

Cd = باتری حاوی کادمیوم است.

Hg = باتری حاوی جیوه است.

- به دلایل زیست محیطی، محصول را در پایان عمر مفید آن در زباله های خانگی نیندازید. دستگاه را به محل جمع آوری یا بازیافت محلی مناسب بسپارید.
- دستگاه را مطابق با دستورالعمل EC - WEEE (ضایعات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی) دور بیندازید. اگر سؤال دارید، لطفاً با مقامات محلی مسئول دفع زباله تماس بگیرید.
- بسته بندی محصول را به صورت دوست با محیط زیست دور بیندازید.



گارانتی

- این محصول دارای ۲ سال گارانتی می باشد.

شرکت تجهیزات پزشکی آرمین درمان
نماینده انحصاری Beurer آلمان



تهران، خیابان کریمخان، خیابان میرزای شیرازی، کوچه ۱۳، شماره ۳۴

کدپستی: ۱۵۸۵۷۷۳۱۴۵ تلفن: ۶ - ۸۸۳۲۶۶۴۴

خدمات پس از فروش: ۸۸۸۶۴۸۱۰ - ۸۸۸۶۴۸۷۲