

شرکت تجهیزات پزشکی آرمین درمان
نماینده انحصاری محصولات کمپانی beurer آلمان در ایران



دستگاه ترازوی دیجیتال

مدل GS 11

تهران-خیابان کریمخان، خیابان میرزای شیرازی، کوچه ۱۳، پلاک ۳۴، طبقه دوم

* این دستگاه شامل دو سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد.*

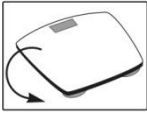

مشتری گرامی

از اینکه یکی از محصولات ما را برگزیدید، سپاسگزاریم. نام ما نشانه کیفیت بالای محصولاتمان در زمینه گرمایی، ترازو، فشارخون، درجه حرارت بدن، نبض، آرامش، ماساژ و مرطوب کننده هوا است که بارها به طور کامل مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته‌اند. لطفاً این راهنما را به دقت مطالعه کرده و از دستورات آن پیروی نمایید. راهنما را برای استفاده خود و دیگر کاربران در دسترس قرار دهید.

گروه Beurer

این دفترچه راهنمای استفاده از محصول را با دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده آتی نگهداری کنید. توجه کنید که دفترچه راهنما در دسترس دیگر کاربران نیز باشد و موارد قید شده در آن را رعایت نمایند.



<p>باتری را داخل ترازو قرار دهید یا نوار عایق را بیرون بکشید.</p> 	<p>برای روشن کردن ترازو با پا به ترازو ضربه وارد کنید تا سنسور لرزشی فعال شود.</p> 
<p>ترازو را بر روی سطح صاف و ایمن قرار دهید.</p> 	<p>صبر کنید تا علامت دیجیتال ثابت شود.</p> 
<p>می توانید ترازو را برای واحدهای مختلف وزن (کیلوگرم/پوند/استون) تنظیم کنید. دکمه تنظیم در پشت ترازو قرار دارد.</p>  	<p>روی ترازو بایستید و خود را وزن کنید. پس از پایین آمدن از ترازو، بعد از ۱۰ ثانیه به صورت خودکار ترازو خاموش می شود.</p>  
<p>پیام خطا: علامت LO به این معنی است که باتری نیاز به تعویض دارد.</p>  	<p>ظرفیت این ترازو ۱۵۰ کیلوگرم است؛ علامت Err به این معنی است که بار ترازو سنگین است. از وزن کشی خودداری شود.</p> 
<p>با پای خیس روی ترازو نروید. مراقب باشید سطح ترازو لغزنده است.</p> 	

توصیه های کلی:

- برای تمیز کردن ترازو از یک دستمال نمدار و در صورت لزوم کمی مایع شوینده استفاده کنید. هرگز ترازو را در آب فرو نبرید و در زیر آب روان نشویید.

- ترازو را در مقابل ضربه، رطوبت، گرد و خاک، مواد شیمیایی، تغییرات شدید دما و میدانهای مغناطیسی محافظت کرده و در مجاورت منابع گرمایی قرار ندهید.
- هرگز با یک پا روی لبه ترازو نروید زیرا اینکار سبب واژگونی ترازو می شود.
- لوازم بسته بندی را در دسترس کودکان قرار ندهید.
- این ترازو مناسب استفاده تجاری نمی باشد.
- در صورت داشتن هر گونه سؤال در رابطه با عملکرد و استفاده از محصول با فروشنده یا خدمات مشتری تماس بگیرید.
- قبل از اعلام خرابی، لطفاً ابتدا باتری ها را کنترل کرده و در صورت نیاز تعویض نمایید.
- تعمیرات فقط باید توسط مرکز خدمات مشتری یا فرد متخصص انجام شود.
- باتری های خالی شده و شارژی مستعمل را در زباله خانگی دور نریزید. باتری ها جزو ضایعات سمی محسوب می شوند بنابراین باید به مکانهای مخصوص زباله های سمی یا محل جمع آوری یا بازیافت سپرده شوند.
- باتری ها دارای مواد سمی هستند. علامتهای زیر در روی باتری نشاندهنده وجود مواد مضر است:



Pb = سرب

Cd = کادمیوم

Hg = جیوه

- برای دفع هر گونه زباله به قوانین محلی مربوط به آن عمل نمایید. دستگاه مستعمل باید طبق دستورالعمل EC - WEEE (ضایعات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی) دور انداخته شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد دور انداختن دستگاه مستعمل به مسئولین شهرداری یا فروشنده مراجعه کنید.



شرکت تجهیزات پزشکی آرمین درمان نماینده انحصاری Beurer آلمان



تهران، خیابان کریمخان، خیابان میرزای شیرازی، کوچه ۱۳، شماره ۳۴

کدپستی: ۱۵۸۵۷۷۳۱۴۵ تلفن: ۶ - ۸۸۳۲۶۶۴۴

خدمات پس از فروش: ۸۸۸۶۴۸۱۰ - ۸۸۸۶۴۸۷۲