

شرکت تجهیزات پزشکی آرمین درمان
نماینده انحصاری محصولات کمپانی beurer آلمان در ایران




ترازوی دیجیتال

مدل : PS 25


این دستگاه شامل دو سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد.

۱- راه اندازی:


- باتریها را مطابق قطب صحیح در جای خود قرار دهید و یا عایق باتری را از محفظه خارج نمایید.

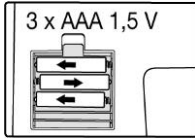

- ترازو را بر روی یک سطح کاملا صاف قرار دهید.

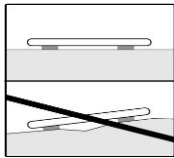


- واحد اندازه گیری را میتوانید به کیلوگرم، پوند و یا استون تغییر دهید.



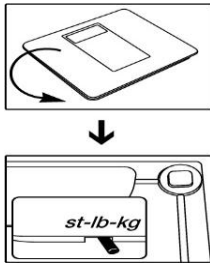


۲- اندازه گیری وزن: روی ترازو بایستید. صبر کنید تا وزن شما بر روی

نمایشگر نمایان گردد.

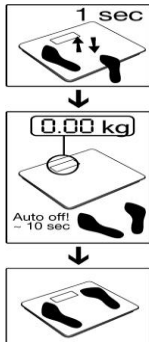

برای استفاده برای بار اول یا هنگام جابجا شدن دستگاه:

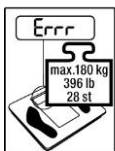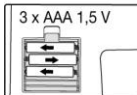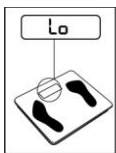

۳- پیغامهای خطا:

- باتری ضعیف است.

- وزن بیش از ظرفیت ترازو است.

خطر لغزش:

سطح لغزنده

نکات مهم:

- حداکثر ظرفیت ترازو ۱۸۰ کیلوگرم می باشد
- دقت دستگاه ۱۰۰ گرم است. (0.2 lb / 0,01 st).
- از دستگاه در مقابل ضربه، رطوبت، گرد و غبار، مواد شیمیایی، شوینده، دمای بالا، تغییرات شدید دما محافظت کنید.
- شما نمیتوانید دستگاه را با یک پارچه مرطوب و در صورت لزوم مقدار بسیار کم ماده شوینده تمیز کنید. هرگز دستگاه را خیس نکنید. ترازوی را در آب فرو نبرید.
- این دستگاه مناسب استفاده تجاری نمی باشد.
- تعمیرات فقط توسط بخش خدمات پس از فروش انجام میگردد.
- بر روی لبه ترازو نیاستید. امکان لغزش!
- وسایل بسته بندی را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- اگر پاهای شما و یا صفحه ترازو خیس است از ایستادن بر روی ترازو خودداری کنید - خطر لغزش!
- دستگاه را در زباله های خانگی قرار ندهید.
- باتریها حاوی مواد سمی و آلاینده مثل سرب کادمیم و جیوه هستند آنها را در زباله های خانگی نیاندازید.

- دور انداختن دستگاه مطابق با قوانین محلی می باشد. دستور ۹۶/۲۰۰۲ WEEE - EC (زباله برق و تجهیزات الکترونیکی).

شرکت تجهیزات پزشکی آرمین درمان نماینده انحصاری Beurer آلمان



تهران، خیابان کریمخان، خیابان میرزای شیرازی، کوچه ۱۵، شماره ۱۴

صندوق پستی ۱۸۱۸ - ۱۱۳۶۵

خدمات پس از فروش: ۸۸۸۶۵۱۵۹

تلفن: ۶ - ۸۸۳۲۶۶۴۴